

Veracia SA ANTERIOR & POSTERIOR

3 : Quick Quality Quartet
YQ pack TIME SAVING

EXZELLENT E ÄSTHETIK
ERHEBLICHE ZEITERSPARNIS




EINE IDEE WIRD REALITÄT

Alters- und funktionsgerechte Prothetik mit hohem Tragekomfort

Bei der Entwicklung der neuen semi-anatomischen **Veracia SA** Front- und Seitenzähne wurde erstmals die Abnutzung verbleibender natürlicher Zähne berücksichtigt.

Sie sind aus der Vorlage der vollanatomischen Veracia Zahnlinie entstanden. Hierbei hat man die funktionellen Charakteristika der Veracia Zähne belassen und an exakt vorbestimmten Sektoren mit Abrasionsbereichen versehen.

Das Ergebnis sind eine deutlich bessere Kauleistung, ein angenehmer Tragekomfort der stabilisierten Prothese und wesentlich weniger Stress für das Kiefergelenk.

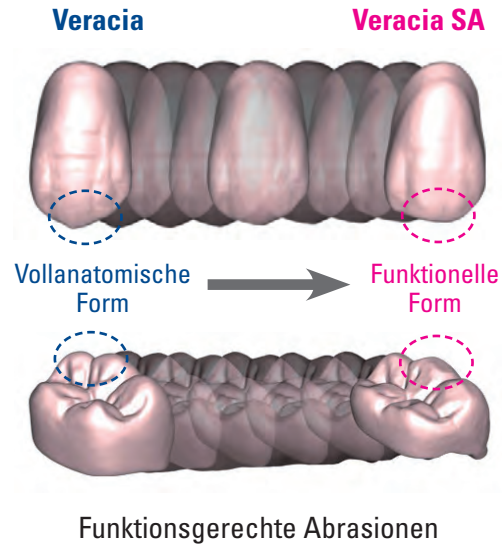

Systemübergreifende Aufstellungen für alle gängigen Okklusionskonzepte

Mit **Veracia SA** sind Sie an kein Okklusionskonzept gebunden. Durch den klaren okklusalen Aufbau, die effektive zentrale Okklusion sowie die gezielt eingearbeiteten Freiräume lassen sich die Seitenzähne gegenseitig leicht und eindeutig aufstellen.

- Balancierte Okklusion
- Lingualisierte Okklusion
- Zahn-zu-Zahn-Okklusion
- Zahn-zu-zwei-Zahn-Okklusion



Balancierte Seite



Arbeitsseite






Einzigartiges Kauflächendesign mit physiologischen Freiräumen


Die Okklusionsareale der **Veracia SA** Seitenzähne sind gezielt in funktioneller Bewegungsrichtung des Unterkiefers um konkave Freiräume erweitert. Die zentrischen Stopps der vollanatomischen Seitenzähne wurden belassen und direkt daneben um entsprechende Freiräume ergänzt.

Diese Besonderheit ist eine ideale Ausgangssituation für die balancierte oder ingualisierte Okklusion, so dass nach der Aufstellung so gut wie keine Einschleifkorrekturen vorgenommen werden müssen.

Darüber hinaus erleichtern diese Freiräume den Patienten das Einfädeln in die statische Okklusion, und laterale Schubkräfte werden auf ein Minimum reduziert.

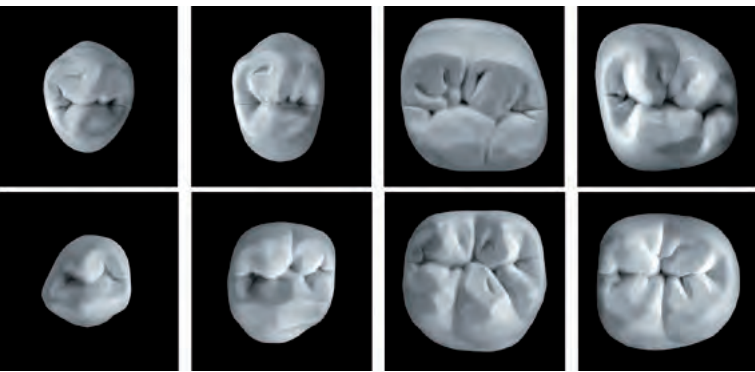


Tiefe okklusale Fissuren, kombiniert mit bewegungsspezifischen Schliiff-Facetten, schaffen eine klare und einfache Zuordnung bei der Aufstellung sowie eine effektivere Kauleistung der fertiggestellten Prothese.

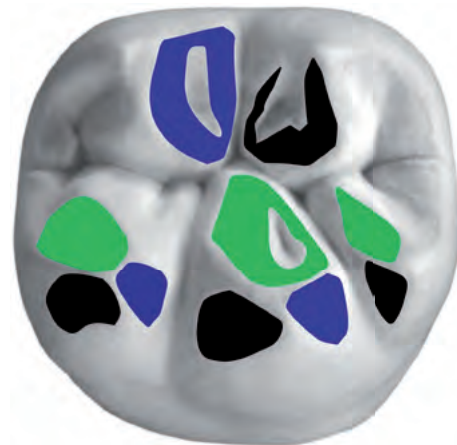

- Laterotrusion
- Mediotrusion
- Protrusion

Zähne, die zueinander finden

Veracia SA unterstützt Ihre Effektivität bei der täglichen Herstellung prothetischer Arbeiten. Durch das einzigartige „Funktionsdesign“ erfolgt die Aufstellung der Seitenzähne praktisch wie von selbst.

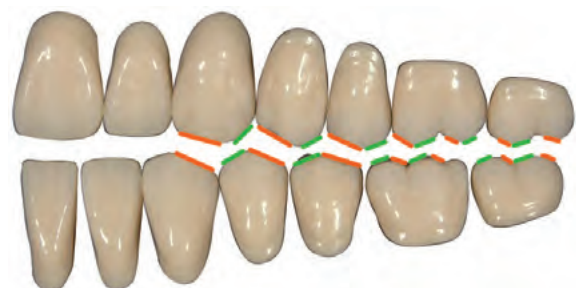

EINS, ZWEI, Q³ PACK ... FERTIG!

Exzellente Ästhetik und Funktion mit erheblicher Zeitersparnis

Das physiologische Design der **Veracia SA** Posteriorzähne ermöglichte die Entwicklung einer einzigartigen wachsfreien Garniturhalterung mit integrierter Aufstellhilfe – **Q³ PACK**.

Mit **Q³ PACK** erreichen Sie erstmals eine mühelose Seitenzahnaufstellung mit immer gleichbleibend exzellenter Funktion und Anwendersicherheit, unabhängig vom eingesetzten Artikulatorsystem.



Q³ PACK reduziert die Aufstellzeit von acht **Veracia SA** Seitenzähnen auf wenige Minuten. Zeitintensive Vorbereitungen oder aufwändiges Equipment sind nicht erforderlich.

Q³ PACK ist präzise und sichert die korrekte Kontaktbeziehung der **Veracia SA** Seitenzähne. Funktions- und Schleifkorrekturen werden auf ein Mindestmaß reduziert.

Q³ PACK enthält einzelne Seitenzähne, die individuell in ihrer Position justiert werden können.

Nur 3 Schritte zur funktionellen Aufstellung



1 Die Frontzahnaufstellung und Vorbereitung der Wachswälle erfolgt in gewohnter Weise. Die mesiale Aussparung von **Q³ PACK** an den Eckzahn platzieren und distal zur Alveolarlinie ausrichten.



2 Die korrekte Position der Haltegriffe in horizontaler Ausrichtung zur Kauebene überprüfen und die Zähne festwachsen.



3 Ein leichter Druck auf den Griff gibt die Aufstellung frei.




Fertig Die Interdentalräume mit etwas Wachs schließen ... fertig.



Beste physikalische Eigenschaften durch MF-H Komposit-Technologie

Die **Veracia SA** Zähne bestehen, wie die bewährten vollanatomischen Zähne der Veracia Zahnlinie, aus mikrogefülltem Hybrid-Komposit (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), verstärkt mit beschichteten Gläsern. Diese homogene Struktur erreicht beste physikalische Eigenschaften und eine hervorragende Beständigkeit.

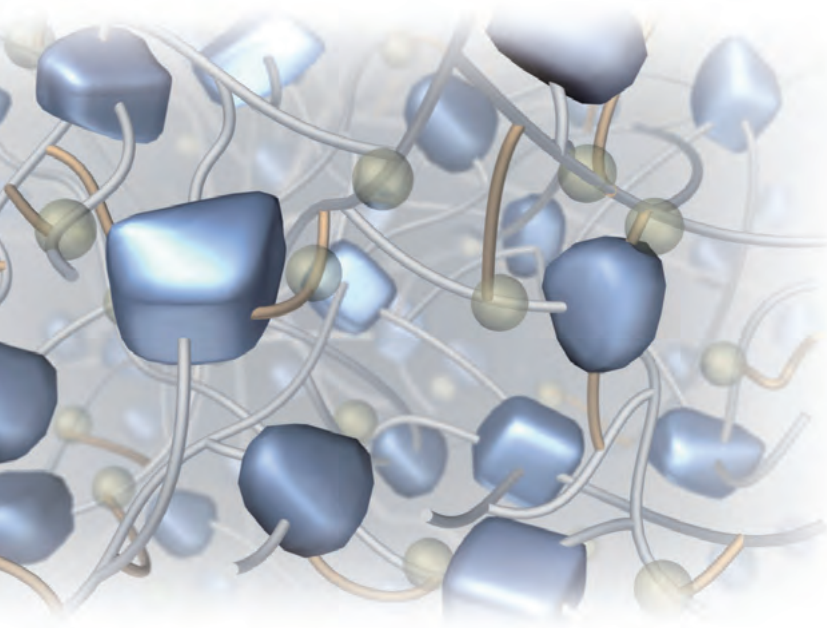

Deshalb Veracia SA

- Alters- und funktionsgerechte Zahnformen
- Keine Bindung an ein Okklusionskonzept
- Zeitsparend bei der Aufstellung
- Balancierte Okklusion, allein durch die Aufstellung
- Hohe Anwendersicherheit
- Effiziente Herstellung im Dentallabor
- Gleichbleibende Qualität der hergestellten Prothesen

EINFACH

Kein aufwändiges Equipment

EFFIZIENT

Wachsfreie Zahngarnitur = Aufstellhilfe

SCHNELL

Keine zeitintensiven Vorbereitungen

PRÄZISE

Immer korrekte Kontaktbeziehungen

UNABHÄNGIG

Mit jedem Artikulatorsystem anwendbar

Die neue Art der Zahn-aufstellung

Mit **Q³ PACK** sparen Sie beim Aufstellen einer Prothese sofort wertvolle Zeit.



Die abgebildeten Restaurationen und Fotos wurden von ZTM German Bär, Sankt Augustin / Deutschland, erstellt.

Quality Quartet

Q³ PACK Veracia SA POSTERIOR
Micro filled hybrid composite teeth Mikrogefüllte Hybrid-Komposit-Zähne Dents en composite hybride micro-charge

12 SETS

SHOFU INC.
KYOTO, JAPAN

Quick Quality Quartet

Veracia SA ANTERIOR

Einfach auswählen

Moderne computerunterstützte Herstellungsverfahren gewährleisten eine immer gleichbleibende Symmetrie der linken und rechten Front- und Seitenzähne sowie eine dimensionstreue Größenordnung.



QUADRATISCH

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	



RECHTECKIG

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	




OVAL

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	



MEHR ABRASIV

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	

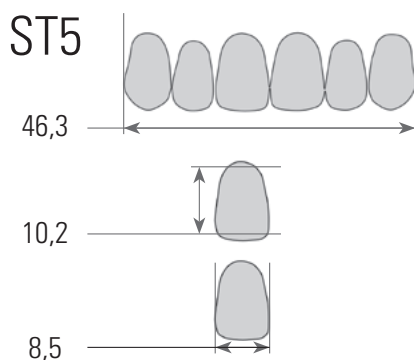

Die Front- und Seitenzähne sind in folgenden VITA* Classical Farben erhältlich:


Anterior A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, D2

Posterior A2, A3, A3,5

Veracia SA POSTERIOR & Q³ PACK


Die Veracia SA Posteriorzähne sind wahlweise als Garnitur auf einem Zahnbrettchen oder als wachsfreies Q³ PACK erhältlich.

S28	28,0		Veracia SA POSTERIOR und Q³ PACK
	8,7		
S30	30,0		Veracia SA POSTERIOR und Q³ PACK
	9,4		
S32	32,0		Veracia SA POSTERIOR Q³ PACK in Vorbereitung
	10,0		
S34	34,0		Veracia SA POSTERIOR Q³ PACK in Vorbereitung
	10,6		
	34,5		
	9,9		

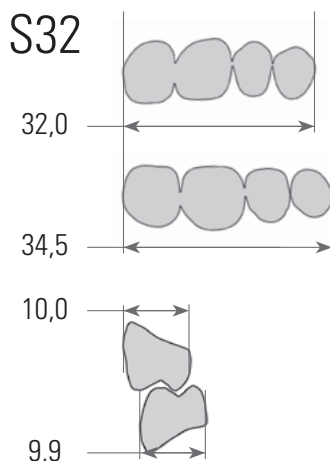

Frontzahnempfehlungen OK / UK

Überbiss
Vertikal

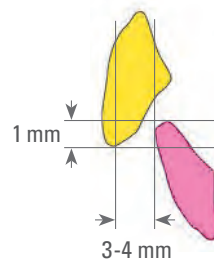


OK	S4	S5	S6
	ST4	ST5	ST6
	O4	O5	O6

Überbiss
Horizontal

UK	MA4	MA5	MA6
-----------	-----	-----	-----

Überbiss
Vertikal

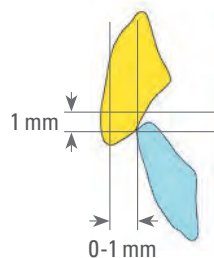

OK	S4	S5	S6
	ST4	ST5	ST6
	O4	O5	O6

Überbiss
Horizontal

UK	MA5	MA6	MA7
-----------	-----	-----	-----

Alle Maße in Millimeter

* VITA ist eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

SYSTEMKOMPONENTEN



Veracia SA ANTERIOR

- 3 OK-Zahnformen in den Größen 4, 5 und 6
- S (Quadratisch)
- ST (Rechteckig)
- O (Oval)
- 1 UK-Zahnform in den Größen 4, 5, 6, und 7
- MA (Mehr Abrasiv)



Veracia SA POSTERIOR

- 1 Zahnform OK / UK in den Größen S28, S30, S32, S34



Veracia SA POSTERIOR Q³ PACK

- 1 Zahnform OK / UK in den Größen S28, S30, S32, S34
- (S32 und S34 in Vorbereitung)



Veracia SA AP FULL SET

- 13 Frontzahngarnituren (9 OK / 4 UK)
- 6 Seitenzahngarnituren (S30, S32, S34: 3 OK / 3 UK)
- Best.-Nr. FSA3**

